


SPLANTAS

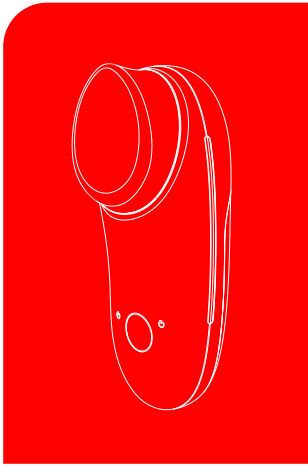


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

MPF-4

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, КРЕМ-БУСТЕР

УСТРОЙСТВО:

1. Датчик (с двух сторон прибора металлические полосы)
2. Крышка
3. Кнопка питания
4. Массажная головка
5. Индикатор «низкого» уровня вибрации
6. Индикатор «высокого» уровня вибрации
7. Индикатор очищения
8. Индикатор увлажнения

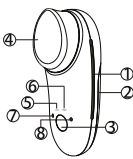

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• Как установить батареи:

Снимите крышку батарейного отсека с устройства, установите 2 батарейки AAA (не входят в комплект) как показано на рисунке и установите крышку на место.



**Режим очищения (положительный электрод) + режим «низкого»уровня вибрации.**  
Удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор. Загорится индикатор очищения и индикатор «Низкого» уровня вибрации в сопровождении звукового сигнала, информируя Вас о том, что оба режима включены.  
**Режим очищения (положительный электрод) + режим «высокого» уровня вибрации.**  
Чтобы переключить прибор из режима «очищение +низкий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня вибрации к высокому уровню вибрации в сопровождении звукового сигнала.  
**Режим увлажнения (отрицательный электрод) + режим «низкого» уровня вибрации.**  
Чтобы переключить прибор из режима «очищение + высокий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня вибрации к высокому уровню вибрации в сопровождении звукового сигнала.  
**Режим увлажнения (отрицательный электрод) + режим «высокого» уровня вибрации.**  
Чтобы переключить прибор из режима «увлажнение + низкий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня вибрации в высокому уровню вибрации в сопровождении звукового сигнала.

При отсутствии переключения режимов в течение 5 минут прибор автоматически выключается.

• Как пользоваться:

**1. Режим очищения (положительный электрод).**  
Для применения прибора в режиме очищения нанесите очищающий гель или тоник для лица. Убедитесь, что Ваши пальцы находятся в полном контакте с датчиком. Приложите массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями.



**2. Увлажнение (отрицательный электрод).**  
Для применения прибора в режиме увлажнения нанесите увлажняющий гель или питательный крем. Убедитесь, что Ваши пальцы находятся в полном контакте с датчиком. Приложите массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями.



• Как чистить:

1. Очищайте прибор после каждого применения, предварительно выключив его.
2. Не используйте стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости для того, чтобы очистить прибор.

СОВЕТЫ:

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Модель: MPF-4  
Питание: 3V==0,3W 2xAAA (не входят в комплект)  
Размер: 48 мм\*38 мм\*98мм  
Материал: ABS

Товар сертифицирован по  
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201, ТР ЕАЭС 037/2016



Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по использованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
  - механических повреждений;
  - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
  - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

«Танбюти Бьюти & Хелс (Шеньжень) Ко., Лтд.»  
Адрес: 601 и 602, Блок Ф5, ТСП Интернешинал Е Сити, Джонгшанг Парк Род, Наншань Дистрикт, Шеньжень, Китай

Импортер / Уполномоченная организация:  
ООО «А-Меркт» 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17/6, этаж 6 офис 605

Служба поддержки потребителей:  
+7 (499) 703 04 95 [www.planta.ru.com](http://www.planta.ru.com)

Дата производства: см. на упаковке

Гарантийный талон

Изделие:\_\_\_\_\_

Модель:\_\_\_\_\_

Серийный номер:\_\_\_\_\_

Дата продажи:\_\_\_\_\_

Торговая организация:\_\_\_\_\_

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:\_\_\_\_\_

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:\_\_\_\_\_

М.П.